




Digital électro stimulateur avec 4 chaînes.

Manuel en Français

Mode d'emploi pour ref. Rimba 7890

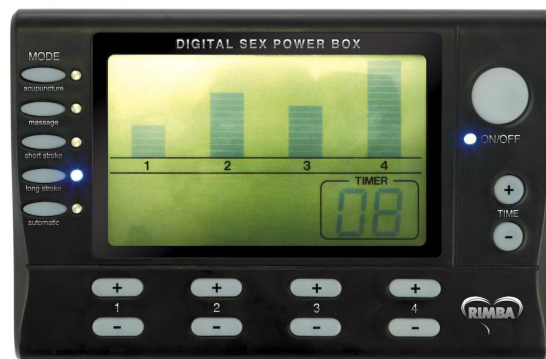

Avant utilisation lisez ce mode d'emploi attentivement. L'utilisateur assume tous les risques inhérents au fonctionnement de cet appareil.

Cet appareil peut fonctionner :

- Sur secteur (110-230volt)
- Sur batterie (piles DC 4,5 V 3 xAAA)

Cet électro stimulateur envoie des impulsions électriques aux différents accessoires électriques qui peuvent être connectés à cet appareil et placés sur n'importe quelle partie de corps tant que la plus courte distance entre les électrodes ne traverse pas la région du cœur. Cette stimulation est d'origine sexuelle, mais peut aussi être utilisée comme instrument médical contre l'incontinence, les problèmes d'érection ainsi que pour les faiblesses musculaires dans les zones érogènes. Consultez votre médecin, avant d'utiliser cet instrument pour les traitements médicaux.

Le but de la stimulation sexuelle par l'électricité est de créer une contraction incontrôlable des muscles dans les zones intimes par le courant électrique.

Ce courant va stimuler les nerfs dans les zones traitées ce qui conduit à des contractions musculaires. Plus le courant est fort, plus les contractions seront fortes.

Rimba a créée et développée de nombreux accessoires différents qui s'adaptent tous à la Power Box Rimba.

Les électrodes ont des tailles et des formes différentes pour faire plaisir aux hommes et aux femmes.

Ce Electro Sex Power Box #7890 à 4 chaînes qui peuvent être contrôlées individuellement par 15 niveaux différents. Il suffit d'utiliser le bouton + ou -. Chaque chaîne est bipolaire, donc 4 accessoires bipolaires différents peuvent être utilisés en même temps, avec le niveau de puissance demandée (différent).

L' Electro Sex Power Box #7890 à 5 programmes de stimulation / thérapie différents. La sélection est visible sur l'écran digital. Ce programme fonctionne pour les 4 chaînes. Tout changement de mode apparaîtra sur l'écran et sera actif pour les 4 chaînes.

Le pack RIMBA #7890 contient:

- 1 x 4 chaîne Power box avec l'écran LCD
- 4 x patches (électrodes)
- 2 x patches collants avec bouton de connexion
- 5 câbles de connexion
- 1 cordon électrique
- 1 adaptateur international pour le voyage (pour GB et USA)
- 1 mode d'emploi



ACCESSOIRES / ELECTRODES :

- #7851 2 pinces plastiques: unipolaire + câble de connexion
- #7852 set « body cups » bipolaires + 2 câble de connexions
- #7853 gode en aluminium, bipolaire 25x155mm
- #7854 gode en aluminium, bipolaire 35x165 mm
- #7855 cockring en cuir, bipolaire
- #7856 scrotum parachute en cuir avec attaches, bipolaire
- #7857 Butt plug en aluminium, bipolaire 35x140mm
- #7858 4 patches auto-adhésifs, unipolaires
- # 7859 petit œuf, bipolaire 25x50mm
- #7860 grand œuf, bipolaire 35x70mm
- #7862 Ball stretcher/cockring, bipolaire 35mm
- #7863 Gode en aluminium, bipolaire 25x125mm
- #7864 Plug en aluminium (en forme de balle) bipolaire 35x100mm
- #7865 Sonde bipolaire 8x180mm
- #7866 Pénis tube en cuir avec fermeture lacet, bipolaire
- #7867 Plug en silicone petit 28x75mm
- #7868 Plug en silicone grand 40x155mm
- #7869 Set de cockrings en silicone en forme plate, unipolaire 40+50mm
- #7870 Set de cockrings en silicone en forme ronde 40 + 50mm
- #7871 Set de cockrings en aluminium (3 pièces), unipolaires, 36 + 42 + 46mm
- #7873 1 patch auto-adhésif, en forme de papillon avec le bouton de connexion
- #7874 Gode en aluminium, bipolaire, 16x160mm
- #7876 Set de gants (complet)
- #7877 Gode en aluminium, 2 boules, bipolaire 35x100mm
- #7878 Gode en aluminium, 5 boules, bipolaire 25x160mm
- #7879 Plug en aluminium, bipolaire 30x90mm
- #7881 2 patchs auto-adhésifs avec bouton de connexion
- #7882 Mini plug en aluminium, bipolaire 25x60mm
- #7883 Cockring en cuir à boucle
- #7884 Harnais de pénis en cuir avec bouton pression, bipolaire
- #7885 Tube de pénis/scrotum en cuir avec élastique, bipolaire

#7886 Gode en plastique, bipolaire 25x145mm
#7887 Mini plug en plastique, bipolaire 25x70mm
#7888 Plug en aluminium, bipolaire 50x105mm
#7889 Ceintures élastiques pour le pénis et/ou scrotum avec câble
#3000 Gel de contact électro flacon de 250ml.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS:

L'électro stimulateur n'est pas pour les enfants et n'est pas un jouet!

Utilisez uniquement avec bon sens et lisez ce manuel attentivement.

- Ne pas utiliser si vous portez un pacemaker
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte
- Ne pas utiliser sur les paupières
- Ne pas utiliser sur une peau présentant des lésions
- Les niveaux d'intensité doivent être ajustés progressivement
- Evitez les changements brusques des réglages de contrôle
- Eteindre la Power box avant de régler (adapter, rajuster), enlever ou changer les électrodes
- La stimulation des régions où les os sont près de la peau (les genoux, le front ou le menton) peut être douloureuse pour quelques patients
- Ne plongez pas la Power box dans l'eau ou dans tout autre liquide
- N'utilisez pas la Power box lorsqu'elle est cassée ou endommagée
- Laissez hors de portée des enfants

Les effets indésirables:


L'irritation de la peau peut se présenter sous ou autour de l'endroit où sont posés les électrodes. Si cette irritation persiste, arrêtez l'utilisation immédiatement.

Recommandation:

Utilisez un gel de contact pour créer un contact optimal entre le corps et les électrodes. (article : #3000 = Rimba Electro Gel, flacon 250ml)

PREPARATION:

1. Vérifiez d'abord si le contenu est complet et dans son état original sans aucun dégât.
2. Placez les piles 3AAA dans leur compartiment au dessous de la Power box digitale ou utilisez ci-joint le cordon électrique (avec l'adaptateur secteur) pour fournir la puissance
3. Vérifiez si la Power box digitale marche en appuyant sur les boutons ON/OFF. La lumière bleue doit s'allumer et le display va montrer l'activité. Le temporisateur va montrer automatiquement 5 minutes et il va commencer à compter.
4. Maintenant appuyez sur les boutons « - » pour ajuster les chaînes au niveau zéro
5. Connectez les électrodes choisis (accessoires) en les insérant dans les chaînes requis (1, 2, 3 ou 4)
6. Votre Power box digitale est prête à l'emploi.

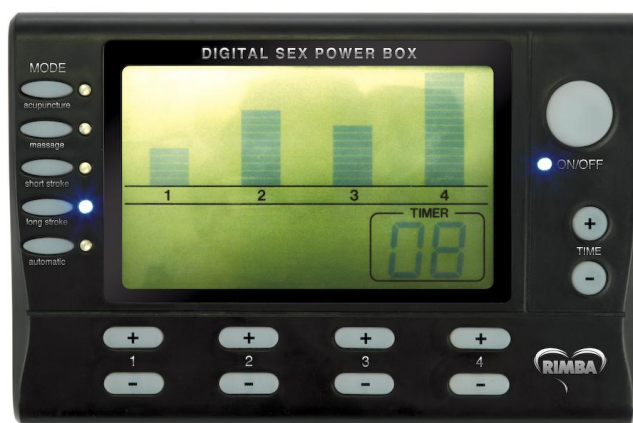

POUR COMMENCER:

1. Placez les électrodes sur le rayon traité. Faites attention aux irritations et aux lésions. Utilisez le gel de contact en grande quantité sur les surfaces sèches, plastiques et métalliques des accessoires.
2. Choisissez un des 5 différents « MODES »,
3. Ajuster le mode du temporisateur ajustable par 5 minutes avec un maximum de 30 minutes sans interruption.
4. Allumez la chaîne demandée en pressant le bouton + de 1er niveau. Si vous voulez, pressez le bouton + de nouveau pour arriver au niveau suivant. Il y a 15 niveaux par chaîne. Le niveau courant est montré individuellement par chaîne sur le diagramme de l'écran.
5. Il est possible de changer le MODE pendant la thérapie. Le graphique sera changé sur l'écran.
6. En cas d'urgence, utilisez les boutons ON/OFF pour arrêter la thérapie.
7. Après avoir éteint la Power box digitale, les électrodes ou patches doivent être enlevés du corps.

TRUCS:

- Nettoyez la partie de corps que vous souhaitez traiter avec l'électrothérapie. Les patches auto-adhésifs vont tenir mieux et plus longtemps.
- Urgence: pressez le bouton ON/OFF pour arrêter le traitement immédiatement.
- Oter les piles quand la Power box digitale n'est pas utilisée.
- Plus le contact est bon, plus la thérapie est efficace. Le gel de contact vous aidera.

Répétez toutes ces actions à chaque utilisation!

COMMANDES:

La Power box digitale est équipé des boutons suivants:

1. ON/OFF : pour allumer et pour arrêter.
2. TIME (+ et -) : le temps désiré peut être ajusté plus ou moins avec des variantes de 5mn. Le temps commence à compter immédiatement. Le niveau maximal de temps est de 30 minutes. Si le compteur arrive à zéro, la Power box digitale sera automatiquement arrêté.
3. MODE : Le mode sélectionné est indiqué par la diode bleue.
4. Boutons d'intensité + et - : Chaque chaîne peut être réglée séparément avec les boutons + et - avec un total de 15 niveaux

L'ECRAN LCD:

L'écran LCD indique quelle chaîne et quel niveau sont actifs. Chaque barre montre un niveau. Le graph montre comment la thérapie se déroule et le temporisateur montre combien de temps il reste jusqu'au la fin de la session.

SECURITE

Le power box n'est pas un jouet pour les enfants. Si vous êtes sous traitement médical, et/ou sous surveillance médicale, consultez votre médecin à propos des risques possibles avant d'utiliser la Power box digitale. Si vous êtes souffrant de tumeurs, d'infections, de trouble du rythme cardiaque, ou de lésions cutanée, considérez s'il vous plait ces facteurs comme étant à risque.

N'utilisez jamais la Power box digitale combiné avec des équipements ou appareillage médicaux comme:

- pacemaker ou instruments cardiaques similaires
- prothèses et/ou tiges, vis, plaques métalliques dans votre corps
- tout instrument électronique utilisé pour la surveillance, le contrôle ou la protection de votre corps et de votre santé

N'utilisez jamais les accessoires électriques près de la région du cœur, les yeux, la bouche ou près de la peau irritée ou de lésion cutanée.

N'utilisez pas la Power box digitale si vous êtes enceinte ou essayez de l'être.

NETOYAGE ET ENTRETIEN:

Nettoyez la Power box digitale avec un tissu humide et avec une petite quantité de savon doux. Frottez précautionneusement le métal. Ne trempez jamais les accessoires et n'utilisez jamais les produits à base de pétrole ou d'alcool pour le nettoyage.

Nettoyez doucement les électrodes (patches) avec un tissu humide et séchez-les. Éloignez-les de la lumière directe du soleil.

Gardez la Power box digitale et les accessoires dans un environnement protégé et sec. Evitez la chaleur extrême, le froid, le feu et les liquides. Ne réparez jamais ce power box par vous même.

N'utilisez aucun d'autre cordon électrique que celui ci-joint.

Enlevez les piles quand la Power box digitale n'est pas utilisé.

SPECIFICATION DU PRODUIT:

Puissance 4,5V 3X AAA

Fréquence: 1-100HZ

Consommation: Max 540mw max

Puissance : Min 25uA 1.25mW; Max100uA, 20mW

Impulsion; 20-220µS



Designed and distributed by:

Rimba B.V.
Pottenbakkerstraat 14
4871 EP Etten-Leur
Netherlands

Tel. +31 (0) 5414484
Fax. +31 (0) 5420703
E-mail: info@rimba.nl
Website: www.rimba.eu

MADE in CHINA